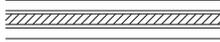


针尖形状

RN可拆卸针		可用于所有的RN型分注器中。但连接部有5~100b用和250b~10p用两种。
PT-2		在穿刺隔膜时,推荐此种尖头类型。 针采用了22°切割,为了防止针堵塞,针尖部带有极小的弯曲。
PT-3		适用于向Rheodyne、Waters等HPLC注射器注入样品。 此外,针尖采用了90°切割,因此还可用于液体的分注。
PT-5		为横眼孔式,用于针的堵塞会造成问题等场合。 适用于穿刺厚于一般的隔膜或薄塑料、塑料薄膜等时。
KH PT-2		针为22°切割。柱塞金属丝一直通到针尖端。 在购买分注器时,柱塞金属丝虽然也进行了相同的切割,但更换时柱塞金属丝为90°切割。
KH PT-3		针为90°切割。柱塞金属丝一直通到针尖,是无泄漏的分注器。